

华大智造
MGI

华大云影
imabot

智能掌上超声

Intelligent Pocket Ultrasound
EF6-CL




探索随心所欲的扫描

Explore Freestyle Scanning, anytime and anywhere

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures

小身材 大视界

C- Convex凸阵探头 + L- Linear线阵探头
可完成多项检查，一键切换探头模式，快速适应不同检查需求

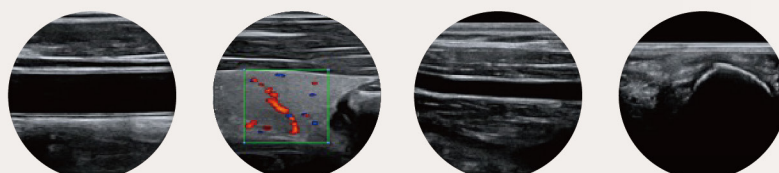




L-Linear 线阵探头

专为浅表组织成像优化, 适用于血管、肌肉、甲状腺等部位的精细检查。



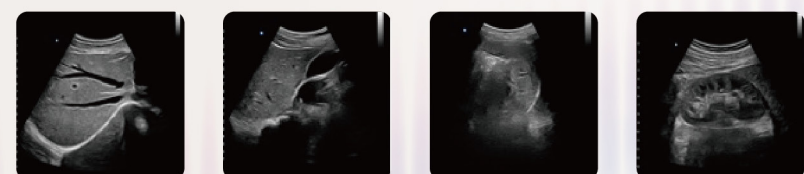

C-Convex 凸阵探头

穿透力更强, 适用于腹部、产科等深部组织的全面扫查。

精于心 简于形

硬件平台	探头设计	双探头二合一(凸阵+线阵),
	频率范围	凸阵:2-5MHz, 线阵:4-13MHz
	硬件参数	通道数64, 阵元数128
便携化	设备尺寸	155mm(H)*73mm(L)*31mm(W)
	设备重量	275g
	成像模式	B/M/C/PW/PDI
	充电方式	无线快充, 6W, 1个小时完成20%~80%
	电池容量	2900mAh
	续航时间	连续扫描时间 ≥ 2.5小时(B模式)
智能化	防水性能	整机封闭式设计, IPX7级防水




智能化	应用拓展	语音控制, 扩展功能特性 智能辅助诊断 支持远程会诊+远程调参
-----	------	---------------------------------------

智联千里
声控万象



- **远程会诊&远程调参**
一键远程专家会诊
实时调节参数
- **辅助诊断**
实时智能辅助诊断
- **语音控制**
语音智能助手控制
- **无线快充**
充电快, 少等待
- **IPX7防水**
防泼溅耐用

精微探 广域行

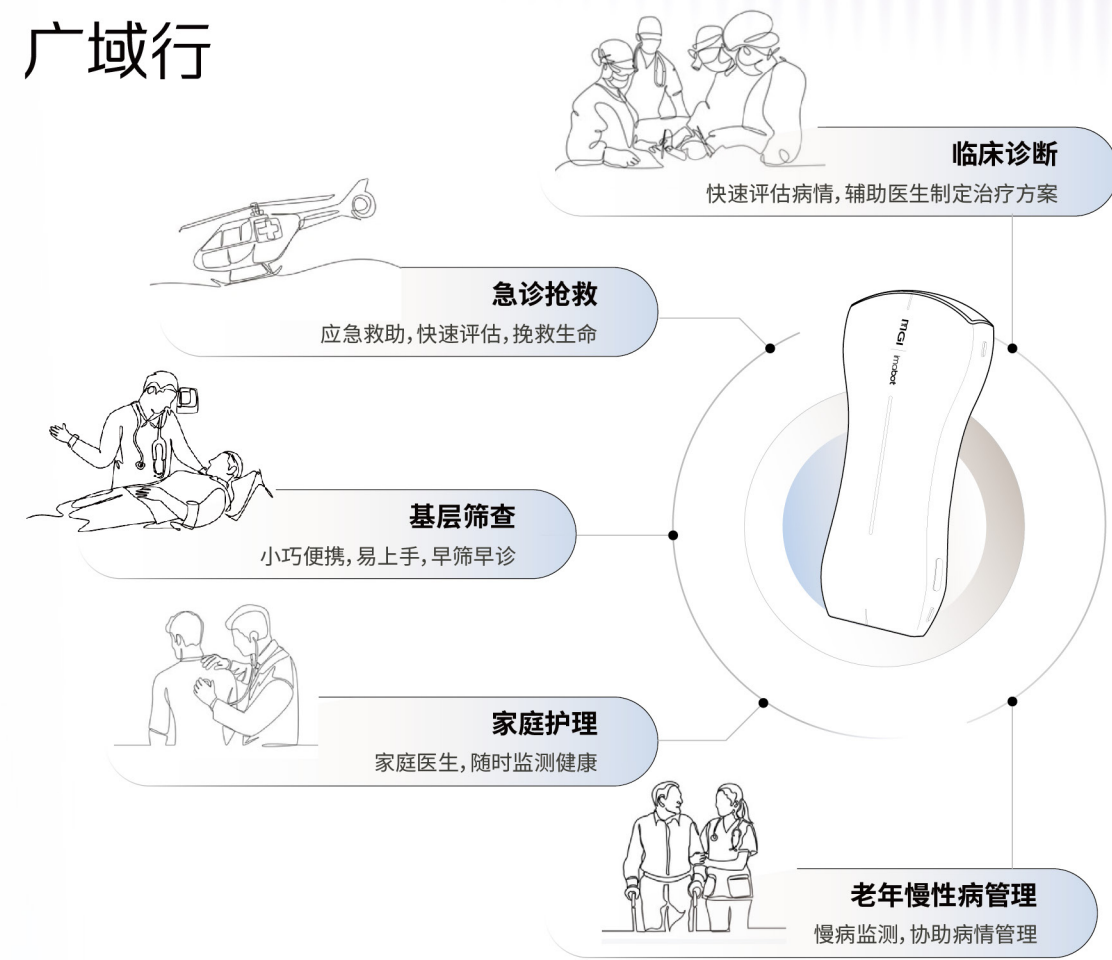

深圳华大智造科技股份有限公司

深圳市盐田区北山工业区综合楼11栋

股票代码：688114

官网：mgi-tech.com

邮箱：MGI-service@mgi-tech.com

电话：4000-688-114



官方微信



官方网站

版本号：2025年3月版

版权声明

本手册版权属于深圳华大智造科技股份有限公司所有，未经本公司书面许可，任何个人或组织不得以任何形式将本手册中的各项内容进行复制、拷贝、编辑或翻译为其他语言。本手册中所有商标或标识均属深圳华大智造科技股份有限公司及其提供者所有。